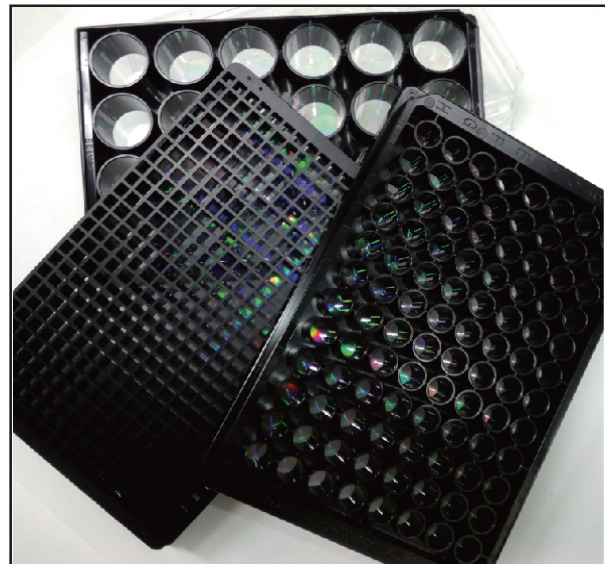


三次元培養用プレート

NanoCulture[®] Plate


Buy 2, Get 1!

得 キャンペーン

期間 2012年3月30日(金)受注分まで
(在庫がなくなり次第終了いたします)

キャンペーン期間中、対象製品をご購入のお客様にお好きなタイプのサンプルプレート[※]を2枚購入につき1枚おつけいたします。応募方法は裏面をご覧ください。

※サンプルプレートは、96 well plate では1～5個、24 well plate では1～3個のエラーウェルを含みます。

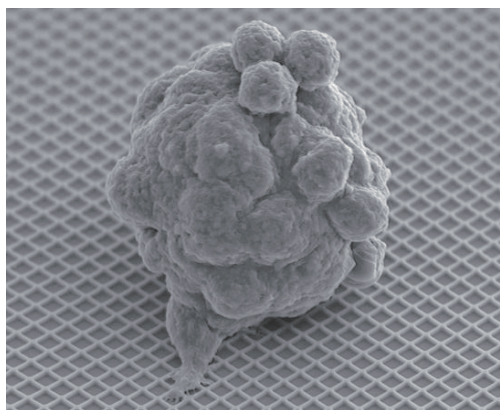NanoCulture[®] Plate (NCP) の特徴

播種3日目のHeLa細胞のスフェロイド

NCPは、ナノインプリント技術により微細加工された合成樹脂フィルムをプレートボトムに採用しています。[※]この微細構造は細胞のプレートへの接着性を適度に抑え、細胞の遊走性を促進させます。細胞はプレート上で遊走と周囲の細胞との接着を繰り返すことにより短期間で大きなスフェロイドを形成します。

簡便な操作性

通常の単層培養の操作と同じ。
袋から取り出して細胞懸濁液をウェルに添加するだけ。

早いスフェロイド形成

播種3日目には顕微鏡観察にてスフェロイドが確認できる。

高い観察性

視野内全てのスフェロイドに対して同一焦点での観察が可能。
そのまま蛍光/発光プレートリーダーで測定可能。

均一な製造ロット

コート剤処理なし。生物由来成分を含まない。
ロット間差はほとんどない。

高い生存率

遊走しながらスフェロイド形成をするため、生きた細胞のみがスフェロイド形成に関与する。

キャンペーン対象製品

製品名	品番	内容量	プレゼント サンプルプレート枚数	メーカー希望 小売価格(税抜)
NanoCulture® Plate MSパターン, 低接着, 96ウェル	NCP-LS96-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-LS96-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MSパターン, 低接着, 24ウェル	NCP-LS24-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-LS24-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MSパターン, 高接着, 96ウェル	NCP-HS96-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-HS96-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MSパターン, 高接着, 24ウェル	NCP-HS24-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-HS24-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MHパターン, 低接着, 96ウェル	NCP-LH96-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-LH96-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MHパターン, 低接着, 24ウェル	NCP-LH24-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-LH24-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MHパターン, 高接着, 96ウェル	NCP-HH96-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-HH96-10	10枚	5枚	¥98,000
NanoCulture® Plate MHパターン, 高接着, 24ウェル	NCP-HH24-2	2枚	1枚	¥29,800
	NCP-HH24-10	10枚	5枚	¥98,000

- ・MS：マイクロスクエア、MH：マイクロハニカムの略。プレート表面に加工されたパターン形状の名称です。
 - ・低接着と高接着は、細胞のプレートへの接着性を表します。
- 細胞ごとのプレートの使い分けについては、弊社 HP をご覧いただくか直接お電話または E-mail でご連絡ください。

キャンペーン応募方法

下記応募用紙に必要事項をご記入の上、代理店の方にご注文と同時に御渡しく下さい。

お客様記入欄

お名前			
ご勤務先			
ご所属			
ご住所			
E-mail			
TEL		(内線)	
購入希望製品コード	サンプルご希望製品タイプ/枚数 (記入例: MH・低接着・96—1枚)		

◆お問い合わせ先◆

SCIVAX 株式会社

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1 かながわサイエンスパーク東棟 502

<http://www.scivax.com/cell/index.html>

TEL: 044-820-0551 FAX: 044-820-0552 E-mail: cell@scivax.com